
משאבת חלב AMEDA עלית



1. **חיבור ערכת שאיבה** חברי את הקונוס לחזה ואת קצה הצינור למשאבה.
2. **כיוון עוצמת השאיבה** את כפתור ה SUCTION סובבי לעוצמה הנמוכה ביותר. העלי בהדרגה את העוצמה, כאשר מורגשת אי נוחות יש לרדת מעט בעוצמת השאיבה.
3. **מהירות השאיבה** בכפתור ה speed סובבי לעוצמה הגבוהה ביותר, כשמתחיל לצאת חלב, יש להנמיך את המהירות במקביל להגברת עוצמת השאיבה, עד שמגיעים לעוצמה ומהירות השאיבה המתאימים לך ביותר.
4. **כאשר מחליפים בין שד לשד, יש להפסיק את עבודת המשאבה.**

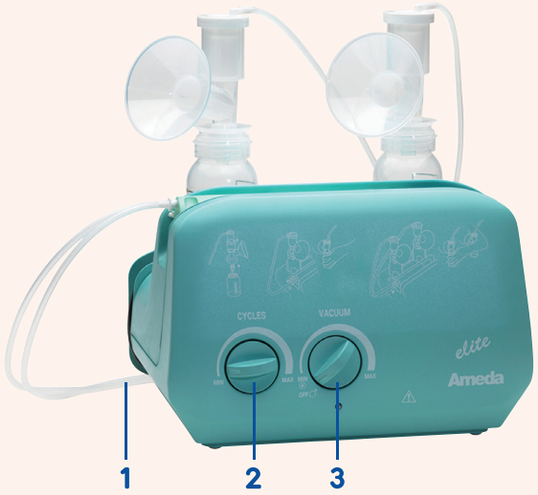

Lactaline

משאבה חשמלית דו/חד צדדית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת הפרטיים או בבתי המרקחת



עלית

משאבה חשמלית דו צדדית

להשיג בכל בתי מרקחת הפרטיים או בבתי המרקחת



משאבה ידנית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת הפרטיים או בבתי המרקחת



UNA

משאבה חשמלית חד צדדית ביתית

להשיג בכל בתי מרקחת הפרטיים או בבתי המרקחת

OMG I'm Branding

שירות לקוחות דין דיאגנוסטיקה 1-800-333-636 | **איריס** 052-7715419

Copyrighted materials of Ameda, Inc. are used with permission

Инструкции по эксплуатации Молокоотсоса “ELITE”

1. **Сборка набора молокоотсоса молокоотсоса** Соедините накладку для груди и конец трубки молокоотсоса.
2. **Поверните кнопку SUCTION в** начальную позицию. Затем постепенно увеличивайте мощность. При появлении дискомфортного ощущения немного понизьте мощность устройства.
3. **Скорость работы молокоотсоса** Поверните кнопку speed, чтобы установить максимальное значение скорости. При появлении молока понижайте скорость параллельно с увеличением мощности до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное сочетание скорости и мощности
4. **При смене груди необходимо остановить работу молокоотсоса.**





UNA Односторонний электрический молокоотсос для домашнего пользования

Доступен в частных аптеках и аптеках



Ручной молокоотсос для домашнего использования

Можно приобрести через интернет (с доставкой на дом) или в любой аптеке



Одно/ двухсторонний молокоотсос для использования в больнице

Для использования в отделениях интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей в больницах




Одно/ двухсторонний электрический молокоотсос для домашнего использования

Можно приобрести через интернет (с доставкой на дом) или в любой аптеке

OMG Tm Branding

Ameda MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.
DYN
Отдел по обслуживанию клиентов Дин Диагностика 1-800-333-636 | **Upuc** 052-7715419
Copyrighted materials of Ameda, Inc. are used with permission

تعليمات تشغيل شفاطة الحليب Ameda علوية

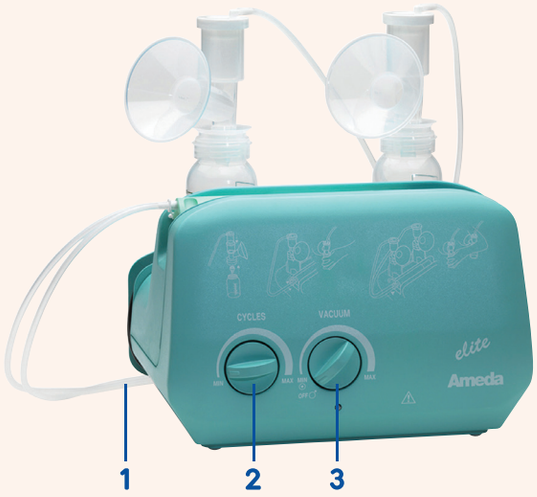

1. **لوصل طقم الشفط** أوصلي المخروط بالصدر وطرف الأنبوب بالشفّاطة.
2. **أديري مفتاح SUCTION** لأقل درجة قوة. ومن ثم ارفعي القوة تدريجياً، وحين تشعرين بانزعاج، خففي قوة الشفط قليلاً.
3. **سرعة الشفط** أديري مفتاح speed إلى أعلى درجة قوة، وحين يبدأ الحليب بالخروج، يجب تخفيف السرعة بالتوازي مع رفع قوة الشفط إلى أن تصلي إلى قوة وسرعة الشفط الملائمة لك.
4. **حين تنتقلين من ثدي لآخر يجب إيقاف الشفاطة عن العمل.**



لاكتالاين

شفّاطة حليب كهربائية جهة واحدة/ جهتين للاستخدام المنزلي

متوفرة في جميع الصيدليات الخاصة أو في باقي الصيدليات

מכבי מאוחדת לאומית



علوية

شفّاطة حليب جهة واحدة/ جهتين

متوفرة في قسم العناية المكثفة وقسم الخدج وقسم المواليد الجدد في مستشفى رامبام



شفّاطة حليب يدوية للاستخدام المنزلي

متوفرة في الصيدليات الخاصة أو في باقي الصيدليات

מכבי מאוחדת לאומית



UNA

شفّاطة حليب منزلية لجهة واحدة

متوفرة في جميع الصيدليات الخصوصية والعمومية

מכבי מאוחדת לאומית

OMG I'm Branding

التشخيص خدمة العملاء 1-800-333-636 القانون | إيريس 052-7715419

Copyrighted materials of Ameda, Inc. are used with permission

DYN

Amēda
MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.